

EMS Foot massager




EMS masażer stóp

6 trybów pracy, 19 poziomów intensywności


Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.


I Mata przewodząca

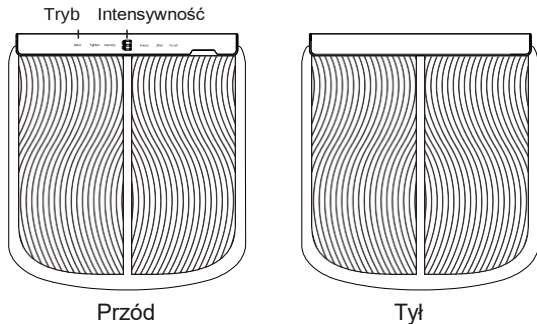

I Elektrostymulator

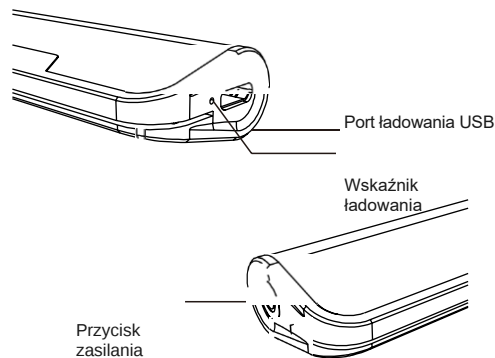


I Pilot zdalnego sterowania

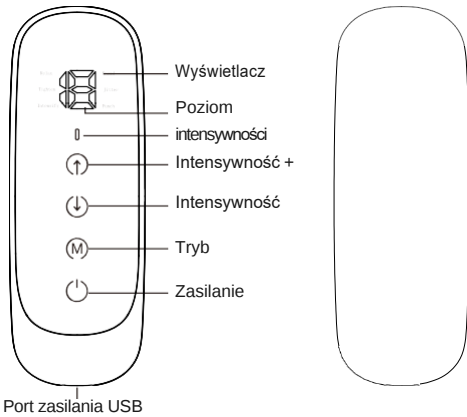

Co to jest EMS?

EMS (*Electrical Muscle Stimulation*) - to sprawdzona klinicznie, bezinwazyjna i niefarmakologiczna metoda elektrostymulacji. Wykorzystuje impulsy elektryczne do wywołania skurczów mięśni. Służy do ich wzmacniania, przywracania funkcji, hamowania spastyki, zapobiega ich zanikowi. Ponadto zwiększa krążenie krwi, co zapobiega zakrzepicy. Metoda EMS może być stosowana jako zabieg rehabilitacyjny czy relaksacyjny.

Funkcje

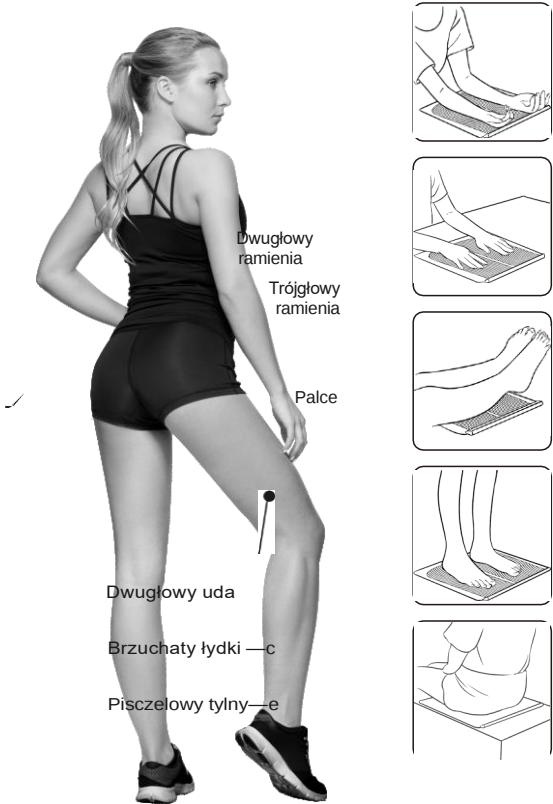

I Użytkowanie

1. Położyć matę przewodzącą na płaskiej powierzchni. Przytrzymać przycisk zasilania maty przewodzącej przez 3s, na wyświetlaczu pojawi się symbol "0".
2. Przytrzymać przycisk zasilania na zdalnym pilocie. Po 3s na wyświetlaczu pojawi się symbol "0". Pilot zdalnie połączy się z matą.
3. Przy użyciu przycisków $\uparrow$ $\downarrow$ zmieniać intensywność elektrostymulacji, a przy użyciu przycisku "M" zmieniać tryb.
4. Wyłączenie poprzez przytrzymanie przycisku zasilania przez 3s. Po wykonanym zabiegu matę przetrzeć do czystości suchą miękką szmatką.

Uwaga

- Jeżeli urządzenie nie będzie wykorzystywane po upływie 1 minuty od czasu jego włączenia, wyłączy się automatycznie.

I Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Nie używać masażera podczas korzystania z innych urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, sztuczne płuco-serce, elektrokardiograf itp. Sprzęt chirurgiczny o wysokiej częstotliwości może spowodować oparzenia skóry w miejscu nałożenia elektrody, a także uszkodzenie urządzenia. Wydajność urządzenia może być zakłócona w pobliżu aparatury do obróbki fal krótkich lub mikro (w promieniu 1 metra). Kobiety w ciąży oraz osoby z wrażliwą skórą, chorobami serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi, nowotworami złośliwymi, ostrą chorobą lub w trakcie leczenia powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia. Nie używać podczas kąpieli lub snu. Nie podawać dzieciom ani osobom nieświadomym. Dostosować intensywność impulsu w oparciu o własne odczucia i indywidualną dopuszczalną granicę odczuwania. Nie demontować urządzenia, unikać upuszczenia i wody.

I Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	EMS masażer stóp
Prąd	Max. 30mA, 0-90V
Zasilanie	5V
Akumulator	Litowo – jonowa o pojemności 90 mAh
Częstotliwość	20-200Hz
Rozmiar	320*330*20mm(mata); 35*98mm (pilot)
Materiały	Tworzywo ABS
Zestaw	mata, elektrostymulator, pilot, ładowarka USB, instrukcja
Programy	6 trybów, 19 poziomów intensywności
Warunki pracy	20 - 40°C

