



Relieve. Recover. Restore

HI5 ARMONA 3D MASAŻER GŁOWY




HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl


www.habys.pl

I. URZĄDZENIE I NASADKI

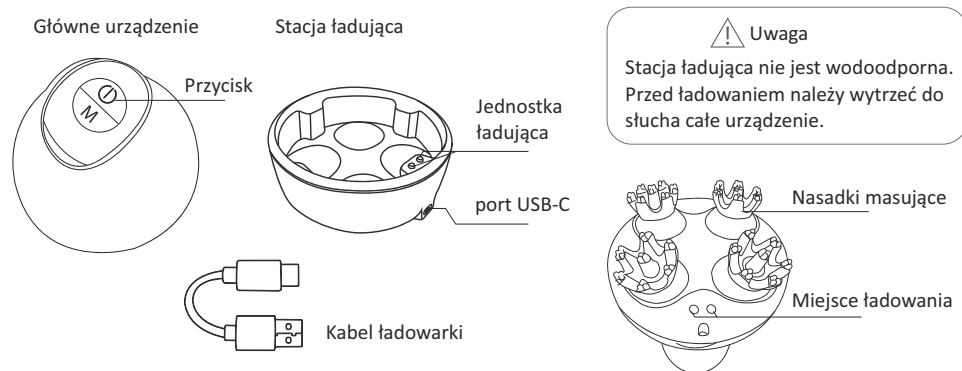

Jednostka główna jest wodoodporna i można jej normalnie używać podczas kąpieli, ale nie wolno moczyć jej przez cały czas w wodzie. Stacja ładująca i kabel ładujący USB nie są wodoodporne. Podczas ładowania należy zetrzeć wilgoć z jednostki głównej. Zabrania się ładowania urządzenia w łazience.

II. INSTRUKCJA OBSŁUGI

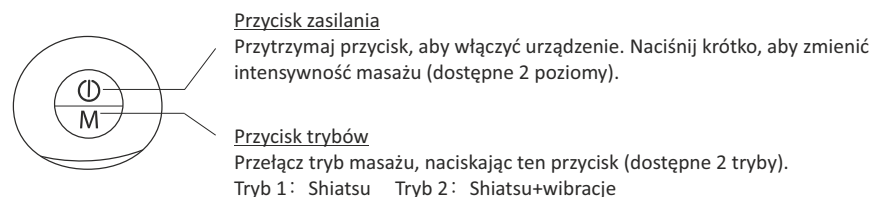

III. PRZED UŻYCIEM NAŁADUJ BATERIĘ

1. Naładuj urządzenie jeśli bateria jest słaba. Gdy poziom baterii jest niski, lampka będzie migać.
2. Do ładowania urządzenia używaj uniwersalnej ładowarki: 5V, 1A.
3. Przed ładowaniem należy dokładnie wytrzeć urządzenie. Ładowanie wilgotnego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.
4. Podczas ładowania należy trzymać 4 głowice masujące jednostki głównej w stanie zamkniętym, aby zapewnić dobry kontakt ze złączem do ładowania.
5. Pełne ładowanie trwa około 3 godzin, a czas pracy około 1 godzinę. Pełen czas ładowania i czas użytkowania mogą się różnić z zależności od temperatury otoczenia.

Wskaźniki	Słaba bateria	Ładowanie	Pełne naładowanie
	Ciągle migają	Wolno migają	Ciągle świecą

IV. OSTRZEŻENIA I UWAGI

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Używanie zabronione dla:

- Użytkowników rozrusznika serca, posiadaczy sztucznego serca, płuc oraz innych elektronicznych urządzeń medycznych do podtrzymywania życia.
- Niemowląt i małych dzieci oraz osób, które nie mogą samodzielnie zrozumieć treści instrukcji obsługi.

Nie używać urządzenia na:

- Obszarze, w którym wykonano operację plastyczną.
- Nieprawidłowościach, takich jak zapalenie skóry i nadmierna ekspozycja na słońce na skórze głowy.
- Ranach, wypryskach, obrzękach i ropnej chorobie skóry głowy.