

WARUNKI GWARANCJI

- Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 - „Producent” oznacza firmę HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, przy ulicy Produkcyjnej 16.
 - „Nabywca” oznacza finalnego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.
 - „Autoryzowany serwis” oznacza serwis prowadzony przez Producenta.
- Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została karta gwarancyjna, w okresie podanym w tabeli będącej załącznikiem niniejszej gwarancji.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją: użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu sprzętu.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
- Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 - stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancji sprzęt był naprawiany poza autoryzowanym serwisem,
 - dokonania w sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez pisemnej zgody Producenta,
 - używania sprzętu po ujawnieniu w nim wady konstrukcyjnej.
- Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, w przypadkach opisanych w punkcie 6, Producent nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody na mieniu lub na osobie, jakie może spowodować używanie takiego sprzętu.
- Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium Polski.
- Wady lub uszkodzenia konstrukcji sprzętu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do Producenta lub autoryzowanego serwisu.
- Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego spełnienia czterech warunków:
 - przedstawienia oryginalnej Karty Gwarancyjnej,
 - przedstawienia faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
 - zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,
 - odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu na koszt Nabywcy.
- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do Producenta lub autoryzowanego serwisu, do dnia w którym sprzęt został udostępniony Nabywcy do odbioru.
- Gwarancja ogranicza się do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do wymiany produktu. Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.
- Jeżeli transport sprzętu był zlecany przez Producenta i sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:
 - zawiadomić Producenta w terminie do 3 dni od daty odbioru przesyłki o wszelkich uszkodzeniach sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia Producentowi zgłoszenia reklamacji firmie transportowej,
 - dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i firmą transportową.
- Zasady gwarancji zawarte w tym dokumencie są jedynymi i oryginalnymi zasadami gwarancji na produkty firmy HABYS Sp. z o.o.
- Okres gwarancji na urządzenie wynosi 1 rok.



Relieve. Recover. Restore

MASAŻER WIBRACYJNY Hi5 MINI LIGHT



HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

I. INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ładowanie

- Port ładowania znajduje się na spodzie urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię do pełna przez ok. 6 godzin.
- Gdy urządzenie jest wyłączone, podłącz kabel USB-C. Jeśli wskaźnik ładowania miga, oznacza że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania. Zalecamy ładowanie urządzenia przed jego całkowitym rozładowaniem.
- Ciągłe świecenie 5 wskaźników baterii oznacza, że masażer został naładowany.

2. Obsługa

- Aby włączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę. Wskaźniki baterii pokazują aktualny poziom naładowania.
- Aby wyłączyć funkcję wibrowania, należy nacisnąć ponownie przycisk zasilania. Wskaźniki szybkości wibracji wskazują aktualną częstotliwość wibracji. Aby zwiększyć natężenie i częstotliwość wibracji, należy ponownie nacisnąć przycisk.
- Aby wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.
- Nasadki należy zdejmować gdy urządzenie jest wyłączone, pociągając i lekko przekręcając.
- Nasadki należy zakładać gdy urządzenie jest wyłączone, wciskając mocno aż do mocnego osadzenia elementu.

II. KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Czyścić lekko wilgotnym ręcznikiem, wytrzeć do sucha miękką szmatką.
- Nie używać alkoholu lub środków zawierających alkohol do czyszczenia.
- Dozwolone jest użycie jedynie małej ilości neutralnego detergentu do czyszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.

III. DANE TECHNICZNE

Wejście: 100-240V~50/60HZ

Ładowanie: USB-C, 5V 2A

Bateria: 1500mAh

Czas ładowania: około 3.5 godz.

Częstotliwość wibracji: 1500-3000rpm

Amplituda: 7mm

Moc: 30W

Waga: 600 g / 1.3 lbs

Rozmiar: 149×44×146mm/5.5×1.7×5.7"

Temperatura działania: 0-40°C/32-104°F

IV. ZASTRZEŻENIA

1. Zasady bezpieczeństwa


Niebezpieczeństwo: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, pożaru lub obrażeń, produkt musi być używany zgodnie z poniższymi zasadami:

- Nie zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów oraz źródeł ciepła. Chronić otwory wentylacyjne przed kurzem i cząstkami brudu.
- Nie wykręcać śrub, nie rozkładać urządzenia na części.
- Nie używać bez przerwy przez dłużej niż godzinę. Należy odczekać 30 min. przed ponownym użyciem.
- Urządzenie przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Chronić przed dziećmi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować urządzenia na następujących częściach ciała: narządy płciowe, twarz, oczy, rany pooperacyjne, zainfekowana, zraniona skóra, uszkodzone kości lub stawy.
- Stosować tylko na czystej, suchej powierzchni ciała, poprzez lekkie uciskanie i przesuwanie po ciele przez około 60 sekund na jednej partii.
- W przypadku bólu lub innego dyskomfortu, należy natychmiast przerwać używanie.
- Ładować wyłącznie oryginalny zasilaczem.
- Zasilacza używać tylko do ładowania urządzenia, nie należy wykorzystywać go do innych celów. Nie używać innych zasilaczy do ładowania urządzenia.

2. Przeciwwskazania

Nie stosować masażera ani innych urządzeń wibracyjnych bez uzyskania zgody od lekarza w poniższych przypadkach: ciąża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki oka, stosowanie rozrusznika serca, niedawno przebyta operacja, epilepsja, migrena, przepuklina dysku, kręgoszynek, spondyloza, spondyloliza, niedawna wymiana stawu, wkładka domaciczna, metalowe pręty lub blaszki. Osoby słabe i dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą podczas stosowania urządzenia. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają zakazu korzystania z masażera, jednak zalecamy uprzednią konsultację z lekarzem.

V. ZESTAW ZAWIERA

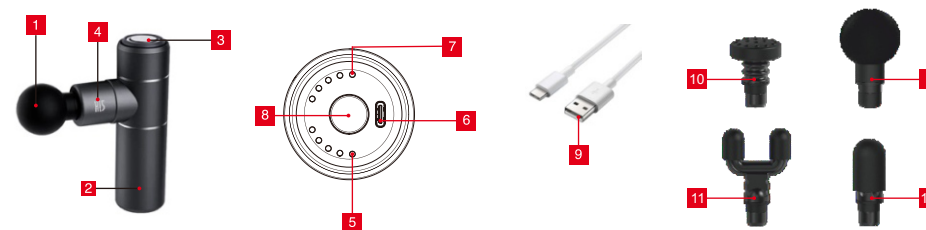

1. Nasadka okrągła
2. Aluminiowa obudowa
3. Okrągły uchwyt
4. Logo Hi5
5. Wskaźnik prędkości

6. Gniazdo USB-C
7. Wskaźnik poziomu baterii
8. Wielofunkcyjny przycisk
9. Kabel USB-C

10. Nasadka płaska
11. Nasadka widełkowa
12. Nasadka pocisk