



Relieve. Recover. Restore

HIS PC KULA ŻYROSKOPOWA



HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL


tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

www.habys.pl

I. WSTĘP

Kula żyroskopowa HI5 to przenośne urządzenie treningowe redukujące stres. Przeciwdziałając sile dośrodkowej generowanej przez prędkość obrotową, uzyskuje się efekt ćwiczenia nadgarstka i przedramienia. Ciesz się przyjemniejszym treningiem nadgarstka, kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz.

II. BUDOWA

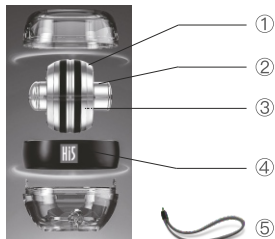

1. Kolorowe podświetlenie
2. Auto start
3. Samoczynnie uruchamiający się mechanizm
4. Antypoślizgowy, silikonowy uchwyt
5. Pasek na nadgarstek

III. DANE TECHNICZNE

Materiał: PC+Silikon

Wewnętrzny materiał rdzenia: ABS+PP+kompozyt

Rozmiar: 59*74mm / 2.3"*2.9"

Waga netto: około 250g / 0.55lbs

Waga brutto: około 300g / 0.66lbs

IV. ZESTAW ZAWIERA

Kula żyroskopowa HI5 PC / Pasek na nadgarstek / Instrukcja

V. OBSŁUGA

1. Delikatnie naciśnij środek piłki kciukami obu rąk i popchnij go w kierunku strzałki.
2. Szybko zwolnij kciuki i chwycić piłkę całą dłonią.
3. Kiedy poczujesz siłę obracającej się kuli, polegaj na sile nadgarstka żeby obracać nią z boku na bok lub po okręgu, wykonując ruchy coraz szybciej, aż włączy się podświetlenie kuli.

VI. OSTRZEŻENIE:

1. Wykonuj ruchy nadgarstkiem, a nie całym ramieniem.
2. Kiedy kula obraca się z dużą prędkością, nie dotykaj wewnętrznej kulki palcami ani włosami.
3. Urządzenie przeznaczone dla dorosłych lub dzieci powyżej 12 roku życia.
4. Nie należy oliwić wnętrza urządzenia. Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia.