

VIII. ŁADOWANIE

- Gdy wyczerpie się bateria, wskaźnik będzie migać na niebiesko a urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co dwie minuty. Po włączeniu, masażer zasygnalizuje stan poprzez 3 sygnały dźwiękowe.
- Podczas ładowania wskaźnik miga na zielono.
- Po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci na zielono. Czas ładowania to ok. 1~2 godz.
- Aby naładować, wybierz zwykłą ładowarkę do smartfona 5 V, 1-2 A, podłącz adapter do gniazdka elektrycznego, podłącz kabel USB-C USB, włóż koniec bocznego kabla DC do portu ładowania urządzenia.
- Baterię można ładować w dowolnym momencie i na dowolnym poziomie naładowania.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas ładowania nie można włączać urządzenia.
- Średni czas pracy to 4-6 godzin. Przy włączonej funkcji grzania urządzenie może pracować około 1 godziny.
- Aby przedłużyć żywotność masażera zalecamy ładowanie raz w miesiącu, jeśli nie było używane przez długi czas.

IX. PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używać masażera podczas korzystania z innych urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, sztuczne płuco-serce, elektrokardiograf itp. Sprzęt chirurgiczny o wysokiej częstotliwości może spowodować oparzenia skóry w miejscu nałożenia podkładek do masażu, a także uszkodzenie urządzenia. Wydajność urządzenia może być zakłócona w pobliżu aparatury do obróbki fal krótkich lub mikro (w promieniu 1 metra).
2. Kobiety w ciąży oraz osoby z wrażliwą skórą, chorobami serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi, nowotworami złośliwymi, ostrą chorobą lub w trakcie leczenia powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
3. Nie używać podczas kąpieli lub snu.
4. Nie podawać dzieciom ani osobom nieświadomym.
5. Zabrania się stosowania u pacjentów z zaburzeniami percepcji skóry lub takich, którzy są niewrażliwi na ciepło.
6. Należy wyłączyć urządzenie przed zmianą pozycji podczas używania. W przeciwnym razie to może spowodować silne podrażnienie skóry.
7. Dostosować intensywność impulsu w oparciu o własne odczucia i indywidualną dopuszczalną granicę odczuwania. Zwiększenie intensywności niekoniecznie wpłynie na poprawę efektu masażu, a duża intensywność może powodować zbyt duże pobudzenie.
8. Nie demontować urządzenia, unikać upuszczenia i wody.
9. Nie czyścić urządzenia wodą.

UWAGA!

Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska, gdy masażer i jego części starzeją się i nie mogą być używane, nie wyrzucaj ich. Należy je odpowiednio złomować. Podczas utylizacji należy przestrzegać lokalnych wymogów ochrony środowiska.



Relieve. Recover. Restore

MASAŻER KARKU Z PODGRZEWANIEM I ELEKTROSTYMULACJĄ



HABYS Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasto, PL
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl


www.habys.pl

I. WPROWADZENIE

Masażer karku Hi5 z funkcją podgrzewania oraz elektrostymulacją. Funkcja podgrzewania działa rozluźniająco i relaksująco. Funkcja elektrostymulacji to metoda niefarmakologicznego i nieinwazyjnego, a przez to pozbawionego wielu skutków ubocznych, leczenia dolegliwości bólowych.

Masażer swoim okrągłym kształtem dopasowuje się do fizjologicznej krzywizny odcinka szyjnego kręgosłupa. Dodatkowo może być sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego. Masażer karku to wyjątkowe urządzenie przeznaczone zarówno do poprawy nastroju jak i terapii.

II. BUDOWA

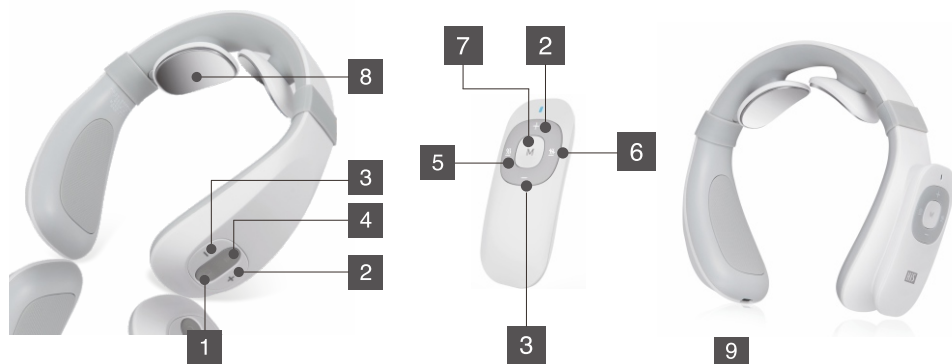

1. Przycisk zasilania
2. Intensywność+
3. Intensywność-
4. Ogrzewanie On/Off
5. Ogrzewanie On
6. Ogrzewanie Off
7. Przycisk trybów
8. Podkładki elektrod
9. Port ładowania USB-C

III. FUNKCJE

1. Ergonomiczna konstrukcja dopasowana do krzywizny ludzkiej szyi.
2. Technologia analizy i adaptacji 3D.
3. 6 trybów pulsacji: automatyczny, bańki, stukanie, drapanie, masaż i akupunktura.
4. Gorąca termo-punktura i gorący kompres.
5. Ładowanie przez port USB-C.
6. Bezprzewodowy pilot.
7. 15 poziomów intensywności.
8. Czasomierz 15-minutowy (automatyczne wyłączenie po zakończonej terapii).

IV. DANE TECHNICZNE

Moc wejściowa: DC 5V/1A -2A
Moc znamionowa: 5W
Bateria: Wbudowana bateria litowo-jonowa 3.7V/1200 mAh
Bateria pilota: Cr2032
Częstotliwość impulsów: 1-1000Hz

V. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Zakres temperatury: -20°C/68°F ~ +55°C/131°F
Zakres wilgotności względnej: ≤80%
Zakres ciśnienia atmosferycznego: 50kPa ~ 106kPa
Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.

VI. UŻYTKOWANIE

- Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aż włączy się niebieskie światło. Wskazówki: Po włączeniu urządzenia domyślnym trybem masażu szyi jest 1, a intensywność wynosi 0.
- Aby włączyć funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk aż zaświeci się lampka. Gdy 6 lampek podczerwieni wewnątrz urządzenia jest zapalonych, masażer zaczyna się nagrzewać.
- Aby wyłączyć funkcję ogrzewania, ponownie naciśnij przycisk Gdy lampki na urządzeniu i 6 lampek wewnątrz zgasnie, oznacza że ogrzewanie jest zatrzymane. Można również użyć bezprzewodowego pilota. Aby wyłączyć ogrzewanie, naciśnij przycisk na pilocie, aż zaświeci się lampka. Gdy włączy się 6 lampek podczerwieni wewnątrz urządzenia, oznacza że rozpoczęło się ogrzewanie.
- Aby wyłączyć funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk na pilocie. Gdy lampki na przycisku i wewnątrz urządzenia zgasną, oznacza to, że ogrzewanie jest wyłączone.
- Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk na urządzeniu lub naciśnij przycisk **M** na pilocie. Po włączeniu, domyślnym trybem jest 1, który jest trybem automatycznym. Naciśnij jeszcze raz, aby przejść do trybu „bańki” w trybie 2, jeszcze raz dla trybu „stukania” w trybie 3, kolejne dla trybu 4, 5, 6: „drapanie”, „masaż”, „akupunktura”.
- Aby zmienić intensywność: naciśnij **+** na urządzeniu lub pilocie, aby zwiększyć intensywność. Naciśnij **-** aby zmniejszyć intensywność.

VII. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Czyścić lekko wilgotnym ręcznikiem, wytrzeć do sucha miękką szmatką. Do czyszczenia nie używać alkoholu lub środków zawierających alkohol.
2. Przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.
3. Nie trzymać na świetle słonecznym, w wysokiej temperaturze lub w wilgotnym miejscu.